




time to relax



braintronics®
brainwave stimulation system

Внесіть релакс у своє повсякденне життя. Передова технологія поєднує заспокійливі масажні програми з інтелектуальною звуковою стимуляцією мозкових хвиль. Дайте своєму розуму та тілу час помріяти та зарядіться енергією чистого життя.



ECOSONIC

3D



CASADA[®]
HEALTHCARE

since
2000

< timetorelax

З моменту заснування компанії у 2000 році найменування CASADA стало синонімом високої якості виробів.

Сьогодні вироби CASADA можна придбати у будь-якій точці світу. Безперервний розвиток, безпомилковий дизайн та акцент на покращенні якості життя є такими ж важливими характеристиками продукції CASADA, як надійність та якість вищого класу.

УВАГА! Даний прилад призначений тільки для особистого домашнього використання і не може застосовуватися в промислових та медичних установах.

Масажне крісло – це ідеальне вирішення проблем втоми та стресу. Масаж у кріслі знімає напругу та забезпечує повне розслаблення та відпочинок втомленим м'язам.

Вітаємо!

Придбавши це масажне крісло, ви попідкувалися про своє тіло.

Щоб ви могли довгий час користуватися перевагами цього виробу, ми просимо вас уважно прочитати та дотримуватись правил техніки безпеки.

Ми щиро сподіваємось, що вам сподобається користуватися персональним масажним кріслом EcoSonic.

Зміст

Протипоказання.....	4
Заходи безпеки	5
Особливості Функції	8
Дистанційне керування	10
Експлуатація	11
Спеціальні можливості	18
Пошук та усунення несправностей	20
Зберігання Технічне обслуговування	20
Технічні характеристики.....	20
Технічне обслуговування	20
Декларація Відповідності Вимогам ЄС	20

Протипоказання

Якщо ви не впевнені, чи варто скористатися масажним кріслом, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

- Використання масажного крісла заборонено під час вагітності або у випадку однієї або кількох з наступних скарг: недавні травми, тромботичні захворювання, будь-які види запалень і набряків, а також онкологічне захворювання.
- Особи з фізичними, когнітивними або розумовими порушеннями або особи, які не мають досвіду та знань, повинні використовувати масажне крісло тільки під наглядом та керівництвом осіб, відповідальних за їх безпеку.
- Щоб уникнути будь-якого дискомфорту або небезпеки під час використання масажного крісла, наступним людям слід проконсультуватися з лікарем перед використанням виробу:
 - неходячи хворі
 - особи, які проходять лікування
 - пацієнти з болями у спині та особи з проблемами хребта/викривленням хребта
 - особи з кардіостимуляторами
- Якщо ви відчуваєте біль під час масажу, негайно припиніть використання виробу.
- Якщо ви отримали травму під час використання крісла, негайно зверніться по медичну допомогу.
- Не масажуйте почервонілі, опухлі або запалені ділянки шкіри.
- Це масажне крісло призначене лише для домашнього оздоровчого масажу та не є медичним масажним виробом. Тому його не можна використовувати як заміну спеціалізованого медичного лікування.
- Ми рекомендуємо щодня користуватися масажним кріслом протягом 30 хвилин. Окремі ділянки тіла слід масажувати не більше 15 хвилин за один раз, тому що в іншому випадку надмірний масаж може призвести до негативних наслідків.
- Цей виріб не підходить для дітей віком до 14 років.
- Діти віком до 14 років повинні перебувати під наглядом. Переконайтеся, що діти не грають з масажним кріслом.

ПРОТИПОКАЗИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ BRAINTRONICS®

- Психози (наприклад, шизофренія, біполярний розлад, ендогенна депресія)
- Розлади особистості
- Епілепсія та подібні розлади
- Хвороби серця
- Захворювання центральної нервової системи
- Тромбози
- Ендогенна депресія
- СДВГ (гіперактивність)
- Нещодавно перенесений серцевий напад або інсульт
- Психічний розлад
- Залежність від наркотиків, алкоголю чи ліків
- Регулярний прийом психотропних препаратів
- Вагітність


ПРИМІТКА: Якщо за релігійними переконаннями вам заборонено медитацію, ми рекомендуємо утриматися від використання Braintronics®.

Заходи безпеки

Перед використанням масажного крісла уважно ознайомтеся з інструкцією, щоб переконатися, що крісло функціонує правильно і з оптимальною ефективністю. Збережіть цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання!

- Масажне крісло відповідає визнаним технічним принципам та новітнім правилам безпечності.
- Масажне крісло оснащено секціями, що підігріваються. Людям, чутливим до тепла, потрібно бути обережними при використанні виробу. (ICE 60335-2-32)
- Масажне крісло не потребує технічного обслуговування. Будь-який потенційний ремонт вправі виконувати лише уповноважені фахівці.
- Неправильне використання та несанкціонований ремонт заборонені з міркувань безпеки та ведуть до втрати гарантії.
- Щоб уникнути травм, не засовуйте пальці між масажними роликками.
- Ніколи не торкайтеся вологими руками до штепсельної вилки.
- Не допускайте контакту масажного крісла з водою, високими температурами та прямими сонячними променями.
- Не використовуйте масажне крісло в умовах високої вологості, наприклад, у ванній кімнаті.
- Не використовуйте масажне крісло в місцях з недостатнім простором або в місцях, де немає вентиляція та утруднена подача свіжого повітря.
- Щоб уникнути небезпеки короткого замикання, від'єднайте масажне крісло від джерела живлення, якщо воно не використовується протягом тривалого часу.
- Не використовуйте пошкоджені вилки або розетки.
- Якщо кабелі/вилки пошкоджені, вони повинні бути замінені виробником, представником сервісної служби або кваліфікованим спеціалістом.
- У разі несправності негайно вимкніть виріб від мережі.
- Компанія не несе відповідальності за можливу шкоду, якщо виріб використовується неналежним чином чи неправильно.
- Не перевищуйте рекомендовану щоденну тривалість масажу в 30 хвилин, щоб уникнути надмірного навантаження на м'язи та нервову систему.
- Щоб уникнути пошкодження крісла, ніколи не використовуйте гострі предмети.
- Щоб знизити небезпеку короткого замикання або пожежі, важливо використовувати тільки розетки, що підходять до вилки, і переконатися, що вилка повністю вставлена в розетку.
- Відключайте масажне крісло від джерела живлення після використання та перед очищенням.
- Не дозволяйте дітям віком до 14 років чистити або обслуговувати виріб без нагляду.
- Якщо під час використання виробу виникає непередбачений збій живлення, негайно встановіть вимикач у положення OFF (ВИМКН) і від'єднайте вилку, щоб уникнути пошкодження масажного крісла.
- Не використовуйте масажне крісло, якщо електричні кабелі є вологими або пошкодженими.
- Діти віком до 14 років, особи з обмеженими можливостями або слабкі люди, які перебувають поряд з масажним кріслом або користуються масажним кріслом, повинні обов'язково перебувати під наглядом.
- Не використовуйте масажне крісло безпосередньо після їжі або у стані алкогольного сп'яніння.
- Використовуйте виріб лише з метою, описаним в інструкції з експлуатації.
- Використовуйте лише аксесуари, надані постачальником.
- Щоб уникнути пошкодження виробу, не вставайте, не сідайте на підніжку та не підстрибуйте на ній.
- Щоб уникнути пошкодженнь або травм, не намагайтеся сидіти на підлоктниках або спинці сидіння.
- Регулярно очищайте масажне крісло і не допускайте потрапляння сторонніх предметів у щілини крісла.
- Не тягніть безпосередньо за кабель живлення.
- При регулюванні положення підніжки або спинки сидіння переконайтеся, що під нею немає інших предметів,
- Виріб призначений лише для домашнього використання.
- Якщо гнучкий силовий кабель пошкоджено, необхідно використовувати інший гнучкий кабель, призначений для тієї ж мети, або придбати відповідний запасний кабель у виробника або сервісного пункту.

Заходи безпеки

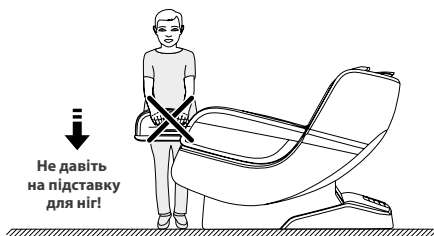


Не давіть на підставку для ніг!


Піднімаючи підніжку масажного крісла, не натискайте на підставку для ніг, щоб масажне крісло не нахилилося вперед і не пошкодилося або пошкодило людей.




Перш ніж сісти на масажне крісло, переконайтеся, що масажні ролики не знаходяться в області сидіння під подушкою, щоб уникнути тиску на сидінці та пошкодження масажного механізму.

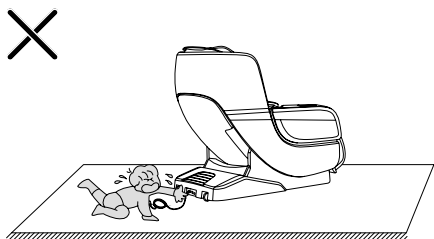


Кабель дистанційного керування або кабель живлення не можна виймати або витягувати, коли крісло знаходиться в режимі очікування або увімкнено, щоб уникнути пошкодження виробу або ураження електричним струмом. Рекомендується від'єднувати кабель дистанційного керування та кабель живлення після використання масажного крісла, коли крісло вимкнено та прибирати їх подалі.

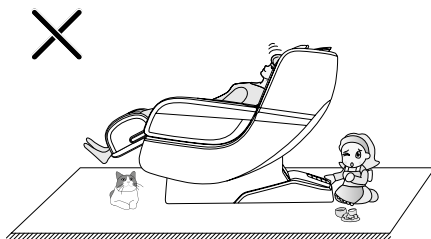

Щоб уникнути травм або пошкодження виробу, перед включенням функції невагомості, переконайтеся, що під підніжкою та спинкою крісла немає дітей або тварин.

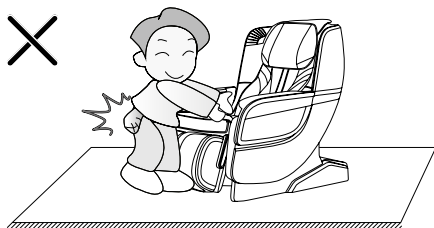

Перед використанням масажного крісла зніміть всі тверді предмети та прикраси (наприклад, ключі, годинники або інші тверді предмети), або витягніть їх з кишень, щоб уникнути пошкодження виробу або травм під час масажу.

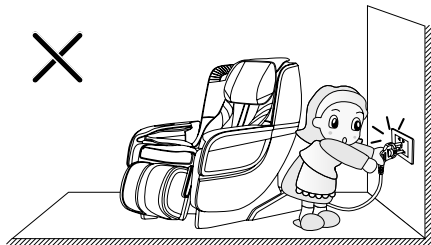


Щоб уникнути пошкодження виробу або отримання травми, під час масажу не висмикуйте шнур живлення та не вимикайте крісло за допомогою вимикача живлення на задній частині крісла.


Заходи безпеки



Не дозволяйте дітям залазити на масажне крісло, або стояти на ньому, а також виконувати інші небезпечні дії, інакше виріб може перекинутися і впасти. Падіння крісла може пошкодити його та травмувати людей.

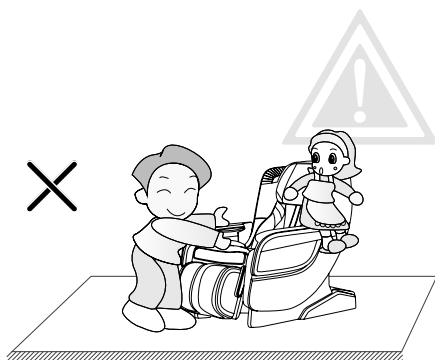


Щоб уникнути пошкодження виробу або отримання травми, масажне крісло не повинно використовуватися більш ніж однією людиною одночасно. Крім того, не дозволяйте дітям грати на масажному кріслі або забиратися на підставку для ніг, подушку сидіння, спинку або підлокітники. Інакше можуть статися нещасні випадки або травми.

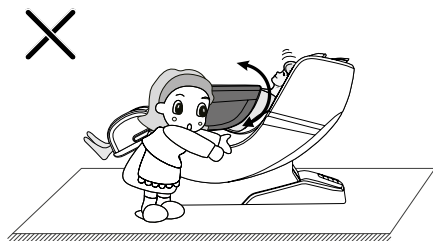

Поверніть підлокітники масажного крісла вгору (поверніть верхні частини підлокітників догори). Не кладіть руки (і не дозволяйте дітям це робити), тверді предмети, ключі, годинники, предмети одягу та інші особисті речі в прорізі підлокітників під час або після масажу, коли ви повертаєте підлокітники в їхнє вихідне положення. Підлокітники повинні бути повернені у вихідне положення після масажу, щоб уникнути пошкодження виробу або травм людей.

Особливості | Функції

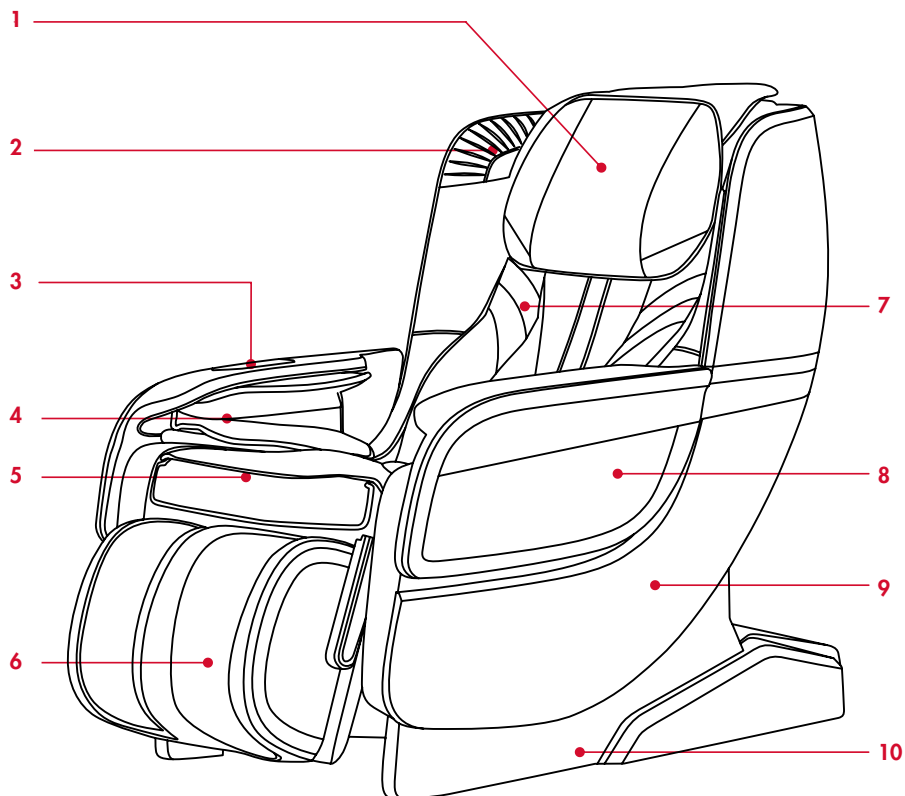

1 Підголівник

2 Динаміки

3 Блок з голосовим та ручним керуванням

4 Компресійні подушки д

5 Подушка сидіння


6 Підставка для ніг

7 Спинка

8 Регульовані підлокітники

9 Бічний елемент

Особливості | Функції

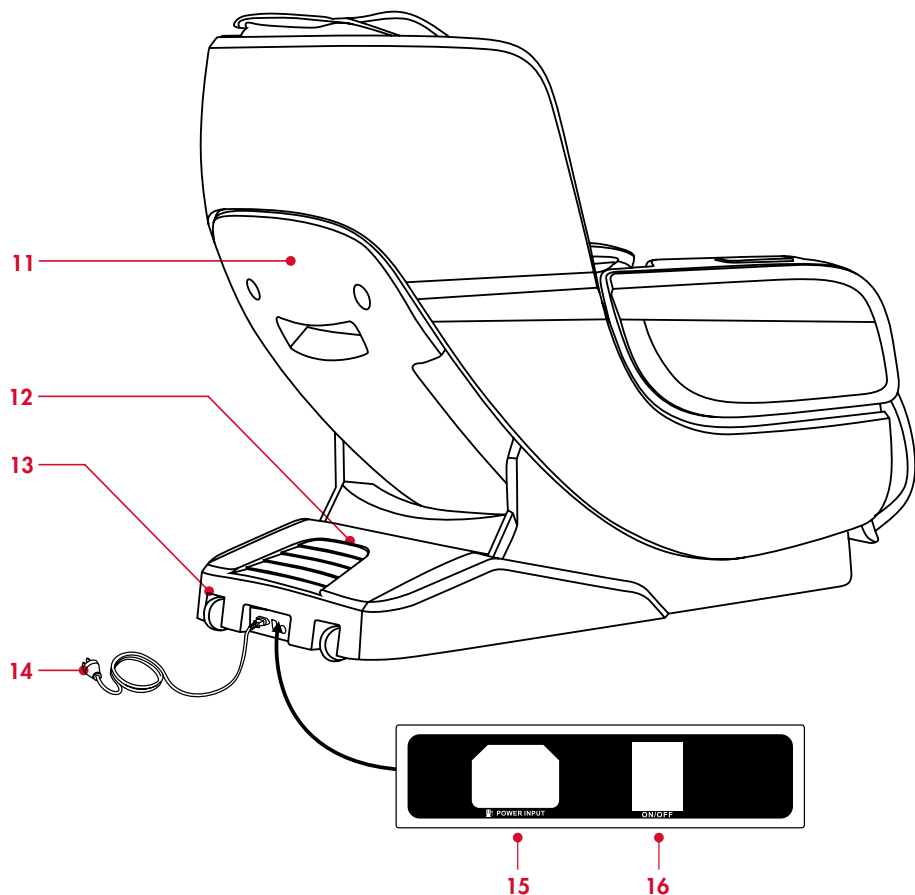

10 Бічна кришка

11 Кришка спинки сидіння

12 Захисна кришка для електроніки

13 Колеса

14 Кабель живлення

15 Роз'єм для підключення кабеля живлення

16 Вимикач живлення

Дистанційне керування

1 Світлодіодний дисплей

Для відображення режиму масажу, налаштування часу та іншої інформації.

2 Кнопка Увімк./Вимк.

Включає/вимикає масажне крісло

3 ВКЛ/ВИКЛ

повітряного компресора для компресійного масажу литок. Передбачено два рівні інтенсивності компресії.

4 Кнопка таймера

Встановлює тривалість масажу.

5 Кнопка зони масажу

Виберіть одну з п'яти зон масажу: точку, область, верхню частину тіла нижню частину тіла чи все тіло.

6 Кнопка «Вниз»

для зони масажу Переміщує зону масажу нижче

7 Автоматичне налаштування

Зміна функції масажу для автоматичної програми (детальну інформацію див. далі).

8 Кнопка «Відстань»

Регулювання відстані між масажними головками. Три рівні: широкій, середній та вузькій.

9 Кнопка «Невагомість»

Визначає кут нахилу крісла з трьома режимами вибору (натисніть один раз для першого режиму, двічі для другого та три рази для третього).

10 Кнопка «Положення сидячи»

Спинка та блок для масажу ніг одночасно піднімаються. Ви можете вибрати найбільш зручне місце для масажу.

11 Кнопка голосового керування Активує функцію голосового керування


12 Кнопка «Прогрів» Увімкнення або вимкнення функції прогріву литок.

13 Кнопка «Вгору» для зони масажу Переміщує зону масажу вище.

14 Кнопка вибору типу масажу Докладніше див. далі

15 Кнопка швидкості Встановлює швидкість масажу.


16 Кнопка «Положення лежачи» Спинка та блок масажу ніг одночасно опускаються. Ви можете вибрати найбільш зручне положення для масажу.

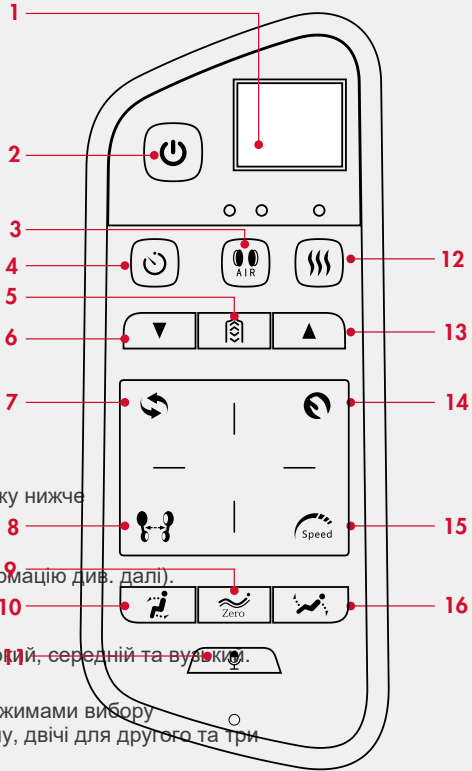


Експлуатація

1. ВКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ


❶ Вставте вилку в розетку

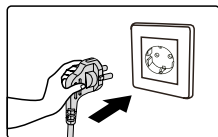

❷ Підключіть кабель до крісла

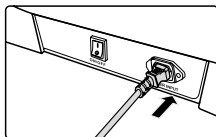

❸ Включіть живлення

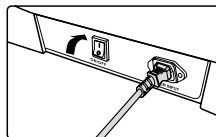

2. ПОЧАТОК МАСАЖУ

❶ Натисніть кнопку живлення, щоб почати масаж, і масажне крісло автоматично перейде в лежаче положення.

❷ Форма тіла користувача визначається автоматично, щоб масажне крісло могло підлаштуватися під ваше тіло. (Ви можете натиснути кнопку Зона масажу, щоб пропустити процес автоматичного визначення і відразу перейти на програму масажу за замовчуванням).

❸ Точне налаштування положення плечей - якщо виявлене положення плечей відрізняється від фактичного, відрегулюйте крісло за допомогою кнопки „вгору” або „вниз”. (Ви можете пропустити цей крок, натиснувши на кнопку Зона масажу).

❹ Перейдіть до режиму масажу та насолоджуйтесь масажем.

АВТОМАТИЧНИЙ МАСАЖ




КНОПКА	ОПИС	ДИСПЛЕЙ
	Швидкий масаж: швидко виконує всі функції масажу.	A1
	Комфортний масаж: розслаблення для м'язів, запускає рух рідини у тілі.	A2
	Легкий масаж: ніжний і приємний глибокий масаж. Допомогає при фізичному виснаженні та розслаблює тіло.	A3
	Масаж всього тіла: глибокий масаж тканин для відновлення життєвих сил	A4
	Масаж плечей та шиї: особлива увага приділяється плечам та шиї.	A5
	Масаж спини та талії: особлива увага приділяється спині та талії.	A6
	Розтягуючий масаж: крісло рухається вгору і вниз	A7
	Відновлення після занять спортом: швидке відновлення після фізичних навантажень.	A8

Експлуатація

РУЧНИЙ МАСАЖ


ФУНКЦІЇ	КНОПКА	ОПИС (варіанти налаштувань)	ДИСПЛЕЙ
Метод масажу		Стоп: відстань між роликами.	S.0
		Разминання: швидкість.	S.1
		Легке постукування: швидкість та відстань між роликами.	S.2
		Разминання та легке постукування: швидкість	S.3
		Шиацу: швидкість та відстань між роликами.	S.4
		Постукування: швидкість та ітервали.	S.5
		3DІ: швидкість .	S.6
		3DІІ: швидкість та відстань між роликами.	S.7
Відстань між роликами		Регулюйте відстань, вибравши одну з трьох положень роликів.	d1 – d3
Кнопка швидкості		Виберіть одну із трьох швидкостей.	P1 – P3

ОБЕРІТЬ ЗОНУ МАСАЖУ


КНОПКА	ОПИС	ДИСПЛЕЙ
	Фіксована точка: масаж певної точки спини.	H0
	Локальний: масаж на обмеженій ділянці спини.	H1
	Верхня частина тіла: масаж верхньої частини спини.	H2
	Нижня частина тіла: масаж нижньої частини спини.	H3
	Все тіло: масаж усієї спини.	H4
	Налаштуйте положення масажу (положення може бути задане в режимах фіксованої точки та локальному режимі).	Масажний механізм рухається нагору.
		Масажний механізм рухається вниз.

Експлуатація


ПОВІТРЯНО-КОМПРЕСІЙНИЙ МАСАЖ

КНОПКА	ОПИС
	Натисніть цю кнопку, щоб вибрати функцію компресії: можливі наступні варіанти: м'яке, сильне і вимк.


ФУНКЦІЯ ТЕПЛО

КНОПКА	ОПИС	ДИСПЛЕЙ
	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути функцію прогріву у сфері ніг. Після включення функції через деякий час ви помітите легке відчуття тепла.	Коли функція активована, над кнопкою вмикається червоний індикатор.


КЕРУВАННЯ ГОЛОСОМ

КНОПКА	ОПИС
	Коротко натисніть цю кнопку, щоб активувати розпізнавання голосу. Натисніть і утримуйте протягом трьох секунд, щоб увімкнути або вимкнути голосове керування.

ПОЛОЖЕННЯ НЕВАГОМОСТІ

КНОПКА	ОПИС
	При кожному натисканні кнопки крісло переміщається в один із трьох режимів невагомості.

НАХИЛ СПИНКИ КРІСЛА

КНОПКА	ОПИС
	ПОЛОЖЕННЯ СІДЯЧИ Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб повільно підняти спинку сидіння, в той час, як блок для масажу ніг опускається. Відпустіть кнопку, щоб зупинити рух. Після досягнення максимально можливого становища рух догори припиниться.
	ПОЛОЖЕННЯ ЛЕЖАЧИ Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб повільно опустити спинку, в той час як блок для масажу ніг піднімається. Відпустіть кнопку, щоб зупинити рух. Рух вниз припиниться, коли спинка досягне найнижчого становища.

Експлуатація

3. ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ

- Скажіть "Hi, Alice", коли масажне крісло увімкнено або перебуває в режимі очікування. Або натисніть натисніть кнопку активації голосового керування на правому підлокітнику, щоб увімкнути голосове керування.
- Натисніть і утримуйте протягом трьох секунд, щоб увімкнути або вимкнути голосове керування.
- Після успішної активації цієї функції масажне крісло відповість "I am here". Якщо протягом шести секунд після цього моменту буде зроблено голосове введення, то після відповіді масажного крісла можна буде виконати відповідну функцію голосового керування. Якщо через шість секунд голосове керування не буде виконано, воно автоматично вимкнеться і його необхідно буде активувати знову.

Зверніть увагу: при включеному голосовому управлінні команди повинні вимовлятися англійською мовою. Не можна говорити дуже швидко. Всі голосові команди, що подаються, повинні відповідати записам голосового управління.

Функція управління голосом
доступна тільки на англійськом мові

КЕРУВАННЯ ГОЛОСОМ

Upward: Ok, up the seat position

Натисніть кнопку на підлокітнику та утримуйте її не менше 3 секунд (вкл/викл голосового керування). Переконайтеся, що пристрій знаходиться в режимі голосового керування. Перед подачею наступних команд промовте „Hi Alice” або „Hey Alice”: у дужках дано переклад команд та відповідей англійською мовою

No.	Ввод голосового керування	Відповідь
1	Massage on Включи масаж	Ok, massage on
2	Massage close Заверши масаж	Ok, massage close
3	Comfort massage Комфортний масаж	Ok, comfort massage
4	Relax massage Розслаблюючий масаж	Ok, relax massage
5	Full body massage Масаж всього тіла	Ok, full body massage
6	Neck massage Масаж шиї	Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage Масаж спини і талії :	Ok, back and waist massage
8	Stretch massage Растягуючий масаж	Ok, stretch massage
9	Fixed massage Масаж в одній точці т	Ok, fixed massage
10	Change the other mode Змінити режим руху	Ok, change the other mode
11	Go little down Опустити вниз	Ok, go little down
12	Go little up Підняти вверх	Ok, go little up
13	Open the air pressure почати компресійний масаж	Ok, open the air pressure
14	Close the air pressure зупинити компресійний масаж	Ok, close the air pressure
15	Up the seat position Підняти положення сидіння	Ok, up the seat position
16	Down the seat position Опустити сидіння	Ok, down the seat position
17	Stop adjustment Зупинити налаштування	Ok, atop adjustment

Зверніть увагу: команди 15 та 16 можна використовувати лише після команди 14.

Експлуатація

4. ІНСТРУКЦІЯ З ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ ЧЕРЕЗ ДИНАМІКИ

1 Увійдіть до головного меню смартфона. Відкрийте Установки та виберіть опцію Bluetooth. Відкрийте Bluetooth, і пристрій автоматично здійснить пошук нового пристрою Bluetooth.

2 Смартфон здійснить пошук відповідної моделі bluetooth (наприклад, Ecosonic-Music).

Натисніть кнопку Pair. Коли вас запитують, чи ви хочете, щоб колонки з'єдналися з пристроєм, просто натисніть Pair ще раз, щоб закінчити підключення.

3 Увімкніть музичний плеєр у смартфоні та виберіть музичний трек.

5. СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ МАСАЖНОГО КРІСА

1 Натисніть червону кнопку увімкнення/вимкнення під час масажу, щоб негайно зупинити всі функції масажу. Масажний механізм і функція автоматичного підйому в сидяче положення скинуться.

2 Після закінчення сеансу масажу (через 20 хвилин після включення) всі функції масажу автоматично вимикаються, а положення скидання масажного механізму не змінюється.

3 Після скидання установок вимкніть живлення всього пристрою.



Креслення положення вимикача живлення




Вимкніть кабель живлення

6. ПОВОРОТ МАСАЖНОГО БЛОКА ДЛЯ НІГ

1 Для цього спочатку поверніть деталь опори так, щоб вона потрапила на нерухому та неповоротну поперечну стійку опори (як показано на рис. 1).


2 Потім поверніть опору для литок назад вниз, потягнувши її вперед приблизно на 5 см (як показано на рис. 2). Виконайте зворотні дії, щоб повернути опору у вихідне положення.

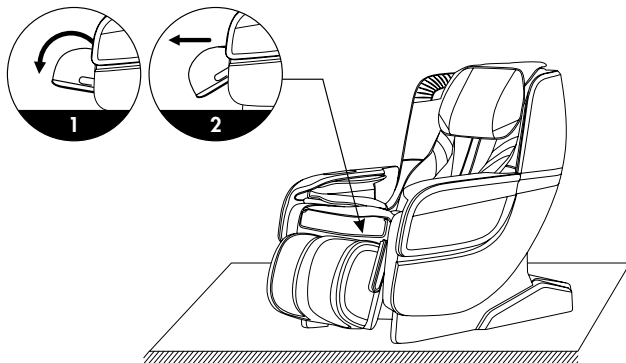

Експлуатація


7. ПІДЙОМ І ПЕРЕМІЩЕННЯ

Для підйому та переміщення масажного крісла потрібно дві людини. Вони повинні підняти крісло одночасно спереду і ззаду, при цьому виїмка на задній кришці масажного крісла повинна служити ручкою ззаду, а перекладина опори для ікри масажного крісла - ручкою спереду. Не піднімайте і не переміщуйте крісло, тримаючи його безпосередньо за підлокітники.

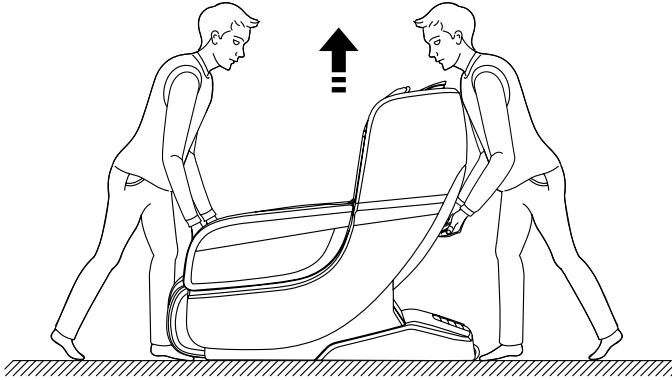

8. ЗАХИСТ ПІДЛОГИ

Тривалий сильний тиск, що робиться масажним кріслом, може подряпати підлогу. Щоб уникнути таких пошкоджень, покладіть килим на підлогу, де стоятиме масажне крісло.

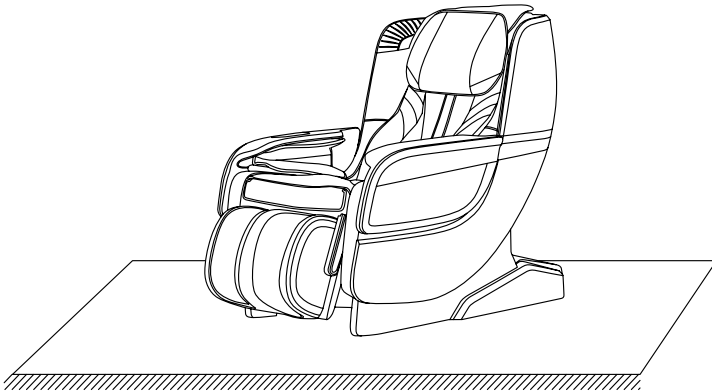


Зверніть увагу: не рухайте масажне крісло на роликках по нерівній підлозі або в обмеженому просторі. Для його підйому потрібно як мінімум дві людини. Як точки підйому використовуйте виїмки в обшивці підніжки та спинки. (Не піднімайте його за підлокітники).

Експлуатація

9. ІНСТРУКЦІЇ З ПЕРЕМІЩЕННЯ

Переконайтеся, що всі кабелі прибрані з поверхні крісла. Потім нахиліть крісло за спинку на вказаний кут (при цьому центр ваги повинен бути на роликах). Потім ви можете просунути масажне крісло вперед у відповідне місце та акуратно повернути його у правильне положення. (Зверніть увагу: перед переміщенням спочатку вимкніть головний вимикач і від'єднайте кабель живлення та кабель дистанційного керування).

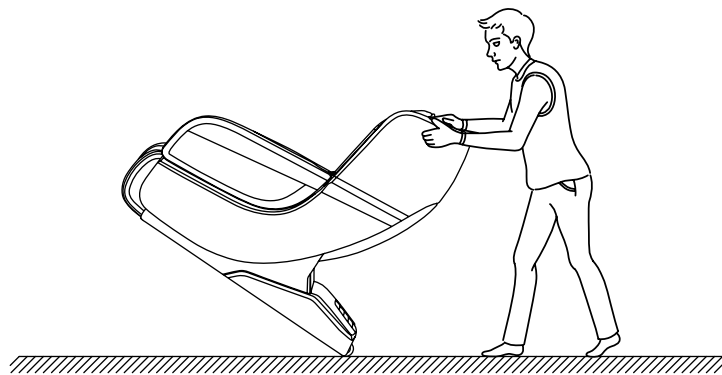

Попередження: Ролики в задній частині масажу підходять тільки для повільного переміщення на невелику відстань. Для переміщення масажного крісла на великі відстані використовуйте інші пристрої!

Спеціальні можливості



РОЛИКОВИЙ МАСАЖ

Поперемінно розслаблює та напружує м'язи, заспокоює та знімає напругу. Ця техніка часто застосовується при завершенні масажу для розслаблення м'язів і релаксації.



РАЗМИНАННЯ

Шкіра і м'язи розминаються або між великим і вказівним пальцями, або між обома руками. Ця техніка масажу найчастіше застосовується для зняття напруги.



КОМПРЕСІЯ

Повітряні подушки наповнюються повітрям та здуваються, стискають та розтискають м'язи. Такий масаж знімає тяжкість з ніг, виводить зайву рідину з тіла та омолоджує.



ПОСТУПОВЕ РОЗМИНАННЯ

Ефективне поєднання розминання та лупцювання.



ПОСТУКУВАННЯ

При стуканні виробляють короткі рухи, що постукують, за допомогою ребра долоні або кулака. Це стимулює приплив крові до шкіри і розслаблює напружені м'язи. Якщо застосовувати техніку биття на рівні грудей, то це сприяє розчиненню слизу в легенях.



L ФОРМА МАСАЖНОЇ КАРИТКИ

У цьому масажному кріслі проводиться глибокий масаж всього тіла від шиї до сідниць.



S-LINE

У процесі цієї автоматичної програми масажні головки, особливо близько прилеглі до тіла, масажують всю спину цілком до області сідниць. S-подібна конструкція направляє створена на основі природної анатомії хребта.



ZERO SPACE-ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ

У положенні масажне крісло пересувається вперед і тому потрібно лише 5 см до стіни позаду. Економія простору та зручність!



НУЛЬОВА ГРАВІТАЦІЯ

Ви приймете становище, знайоме космонавтам як відчуття невагомості.



АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ

Спеціально розроблені автоматичні програми для всього тіла, які передбачають широкий діапазон масажних технік. Крім того, можна ввімкнути функцію прогріву за бажанням.



МАСАЖ ЗОНИ СПИНИ

індивідуально підлаштовується під анатомічні особливості користувача.



РЕГУЛЬОВАНА ПОДУШКА

Масажні ролики можуть бути переміщені вгору або вниз в будь-яку зону в області плечей та шиї.



BRAINTRONICS®

Ритмічні звуки спеціальних програм Braintronics® на 21 хвилин занурюють у медитацію (альфа-стан). Таке розслаблення відновлює сили не гірше ніж 2 години сну.



ІНТЕНСИВНІСТЬ КОМПРЕСІЙНОГО МАСАЖУ

Регульована інтенсивність компресійного масажу.

Спеціальні можливості



МАСАЖ 3D

У цій новій техніці масажу ролики рухаються не лише вгору і вниз, а й уперед і назад.



ШИАЦУ

Шиаци (натискання пальцями) – це розроблена у Японії техніка на біо-активні точки. Масаж складається з м'яких ритмічних розтягувань і поворотів, що глибоко проникають. Метою шиаци є стимулювання окремих точок на тілі та забезпечення рухливості м'язів.



МАСАЖ В ОДНІЙ ТОЧЦІ

Масажні ролики можна проводити масаж у конкретній точці тіла.



ШВИДКІСТЬ

Регульована швидкість масажу.



ШИРИНА

Відстань між масажними роликами можна регулювати (вузький, середній та широкий).



МУЗИКА

Функція музики для додаткового розслаблення та насолоди.



BLUETOOTH

Бездротова передача даних.



ВІДЧУТТЯ РУЧНОГО МАСАЖУ

При виборі цієї настройки спеціально розроблені масажні головки імітують рух рук масажиста. Вони можуть висуватися на 6,5 см з максимальним кутом 41 градус і здатні масажувати шийні, грудні та поперекові м'язи ефектом ручного масажу.



ШВИДКИЙ ДОСТУП

Кнопки швидкого запуску на підлокітнику забезпечують швидкий і простий доступ до найбільш важливих функцій.



АВТОНОМНЕ ГОЛОСОВЕ КЕРУВАННЯ

Використовуйте голосове керування для активації вибраних функцій.



ВУГЛЕЦЕВО-ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО ДЛЯ НІГ

Інфрачервоне тепло глибокої дії розширює кровоносні судини і стимулює кровообіг. Тепло знімає м'язовий тонус, що призводить до глибокого розслаблення.



ОБЕРТИ МАСАЖНОГО БЛОКУ ДЛЯ НІГ

Можливість повороту на 180° дозволяє вибирати між відпочинком для ніг і компресійним масажем.

Пошук та усунення несправностей

НЕСПРАВНІСТЬ

ОПИС

- | | |
|---|---|
| • Під час роботи чути звук двигуна. | • Це нормальний робочий шум. |
| • Пульт дистанційного керування не працює належним чином. | • Переконайтеся, що мережний штекер правильно встановлено в розетку і мережевий кабель увімкнено. Перевірте пульт ще раз. |
| • Виріб перестав працювати | • Крісло автоматично вимикається після досягнення заданого часу роботи або після надто тривалого використання. Це забезпечує крісло тривалий термін експлуатації. |
| • Програми Braintronics® не запускаються. | • Переконайтеся, що ви встановили програму Braintronics та активували свій обліковий запис. Крім того, перевірте, чи з'єднання Bluetooth® зберігається між смартфоном і масажним кріслом. |

При виявленні серйозніших несправностей просимо звернутися до продавця чи генеральному імпортеру.

Зберігання | Технічне обслуговування

- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, слід змотати кабель живлення та зберігати пристрій у сухому приміщенні.
- Ніколи не зберігайте пристрій при високих температурах або поблизу відкритого вогню. Уникайте тривалого впливу сонячного світла.
- При чищенні використовуйте лише наявні у продажу засоби для штучної шкіри.
- В жодному разі не чистіть розчинником, бензолом або спиртом.

Технічні характеристики

Розміри: у вертикальному положенні: 70 x 104 x 99,5 см
лежаче положення: 70 x 135 x 80 см

Вага: 59 кг

Напруга: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Номинальна потужність: 65 Вт

Час роботи: 20 хвилин

braintronics®: 21 хвилина

Офіційний представник в Україні

Офіційний представник CASADA в Україні:
Касада Україна
м. Київ, пр-т. Володимира Івасюка, 8, корпус 5

+38050183-83-83

+38067576-23-23

+38044209-05-21

<https://casada.ua>

Сертифікати:

