



REFLEXOMED II



З моменту свого заснування в 2000 році ім'я CASADA означає високоякісні продукти в сферах оздоровлення та фітнесу.

Сьогодні пристрої CASADA доступні в 37 країнах світу. Продукцію CASADA, а також надійність і відмінну якість характеризують безперервний розвиток, характерний дизайн і сувору спрямованість на підвищення якості життя.

Вітаємо!

Купуючи цей масажер, ви продемонстрували уважність до здоров'я.

Щоб ви могли довго користуватися перевагами цього пристрою, ми просимо вас уважно прочитати та дотримуватися інструкцій з безпеки.

Сподіваємось, вам сподобається ваш особистий **ReflexoMed II**.

Зміст

Інструкції з техніки безпеки	4
Обсяг поставки	4
Технічні дані	5
Введення в експлуатацію.....	5
Пульт дистанційного керування.....	6
Функції	6
Особливості	7
Рефлекторні зони стопи	8
Усунення несправностей.....	10
Зберігання Догляд	10
Декларація відповідності ЄС	11
Гарантійні умови	11

Інструкції з техніки безпеки



Перш ніж використовувати цей масажер, будь ласка, уважно прочитайте наступні інструкції, щоб забезпечити належну роботу та оптимальну ефективність. Зберігайте цю інструкцію з експлуатації!


- Цей масажер відповідає визнаним принципам технології та діючим нормам безпеки.
- Цей пристрій не вимагає обслуговування. Будь-який ремонт, який може знадобитися, може виконувати лише авторизований спеціаліст. Неправильне використання та несанкціонований ремонт заборонені з міркувань безпеки та призведуть до втрати гарантії.
- Ніколи не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Уникайте контакту пристрою з водою, високими температурами та прямими сонячними променями.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, вийміть шнур живлення з розетки, щоб уникнути ризику короткого замикання.
- Не використовуйте пошкоджені вилки, кабелі або незакріплені розетки. Якщо вилки або кабелі пошкоджені, їх має замінити виробник, представник сервісної служби або кваліфікований персонал. Якщо виникла несправність, будь ласка, негайно відключіть джерело живлення. Неналежне або неналежне використання виключає відповідальність за збитки.
- Щоб уникнути надмірної стимуляції м'язів і нервів, не слід перевищувати рекомендований час масажу 15 хвилин.
- Ніколи не використовуйте загострені або гострі предмети.
- Слід уникати будь-якого масажу, включно з масажем рук, під час вагітності та | або у вас є одна чи декілька з наступних скарг, пов'язаних із масажем: нещодавні травми, тромботичні захворювання, запалення та набряки всіх видів і рак. При лікуванні недуг і хвороб перед масажем рекомендується проконсультуватися з лікарем.
- Якщо ви залежите від допоміжних електроприладів, таких як кардіостимулятори, обов'язково зверніться до лікаря перед масажем.

Обсяг поставки

- Масажер для ніг ReflexoMed II
- Дистанційне керування
- Витачки на тканині

Технічні дані

Маса	48,1 x 40,2 x 24,8 см
вага	8,5 кг
Напруга	Вхід змінного струму 220-240 В ~ 50 60
Номинальна потужність	Гц 65 Вт
Тривалість	15 хвилин
Сертифікати	

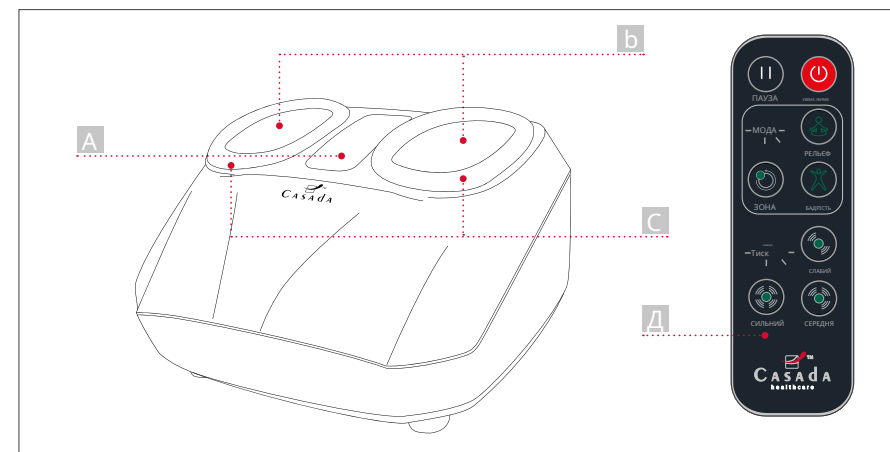

- A** Тримач дистанційного керування для
- b** Виступи для ніг
- C** Витачки на тканині
- Д** Дистанційне керування

Введення в експлуатацію

Перед використанням приладу перевірте, чи відповідає напруга мережі напрузі, зазначеній на приладі. Якщо ви ще цього не зробили, вставте вилку в розетку.

Дистанційне керування



кнопку	функція
увімк./вимк	Натисніть УВІМК./ВИМК. кнопку, щоб увімкнути пристрій. Прилад запускається в стандартному режимі РЕЛЬЄФ , у найнижчому (СЛАБИЙ) інтенсивність повітря.
ПАУЗА	Прес п під час застосування ПАУЗА -кнопку, щоб призупинити всі функції.
ПОВІТРЯНИЙ ТИСК	3 Міжн рівні міста: СЛАБИЙ СЕРЕДНЯ СИЛЬНИЙ
РЕЖИМИ	Ви можете змінити режим, коли пристрій увімкнено. Типовим режимом є режим. БАДЬОРІСТЬ або ЗОНА . Щоб скористатися нею, натисніть відповідну кнопку на <small>Дистанційне керування.</small>

Автоматичний масаж триває 15 хвилин. Через цей час масажер автоматично вимкнеться, щоб запобігти перегріву. Від'єднуйте шнур живлення від електричної розетки після кожного використання.

особливості

функція	ОПИС
РЕЛЬЄФ	Режим РЕЛЬЄФ <i>розслаблюючий</i> <i>розвантажувальний</i> . Інтенсивність тиску повітря можна регулювати.
БАДЬОРІСТЬ	Режим БАДЬОРІСТЬ <i>Сильний</i> . У цьому режимі темп збільшується, а інтенсивність повітря стає трохи сильнішою. Інтенсивність тиску повітря можна регулювати вручну.
ЗОНА	ЗОНА - Режим фокусує масаж на одній частині стопи протягом певного періоду часу. Інтенсивність тиску повітря можна регулювати вручну.

Особливості



ТИСК ПОВІТРЯ

Подушки безпеки, які піднімаються та опускаються, викликають накачування, яке створює природні м'язові рефлекси.



ЗОНИ ВІДБИТТЯ

Рефлексотерапія стоп відновлює м'язи стопи і надає гармонізуючу дію практично на всі органи тіла.



ПІШНИЙ СКУТЕР

Масаж ніг Deluxe – насолоджуйтеся цими унікальними роликками для масажу ніг вдома в будь-який час.



АВТОМАТИЧНИЙ

Спеціально розроблені автоматичні програми пропонують широкий вибір різноманітних технік масажу.




ТОЧКИ АКУПРЕСУРИ

Масажуються ключові точки акупресури на щиколотках.



3D МАСАЖ

Завдяки цій новій технології робот-масажер рухається не тільки вгору-вниз, а й вперед-назад.

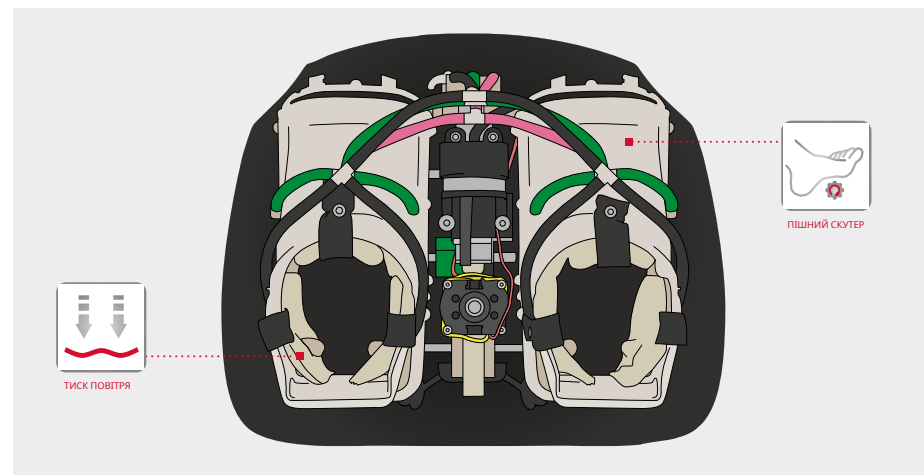

Рефлекторні зони стопи

Рефлексотерапія стоп має перевагу перед масажем всього тіла, оскільки на стопі розташовано близько 72 000 нервових закінчень від різних органів. Цілеспрямований масаж може позитивно вплинути на організм і підвищити особисте самопочуття.

Ретельний масаж рефлекторних зон стоп може, серед іншого, стимулювати метаболізм і кровообіг, стимулювати травлення і підтримувати процес самовідновлення організму.

Чим більше ми дбаємо про життєздатність наших ніг, тим краще почуваємося наше тіло: стопи слід розуміти як мікросистему, в якій можна відобразити весь організм і про нього можна індивідуально піклуватися.



Рефлекторні зони стопи



- > Нехтування ногами може вплинути на весь організм.
- > Неправильна постава тіла може викликати напругу м'язів. Це, у свою чергу, може мати шкідливий вплив на хребет і нервові шляхи та призвести до подальших фізичних проблем.
- > Проблеми зі сном і холодні ноги зазвичай є результатом проблем з кровообігом.
- > набряк ніг, м'язові судоми та застійні явища можуть бути спричинені надмірним сидінням і відсутністю фізичних вправ.
- > Забезпечте ноги достатньою кількістю енергії, щоб вени, розташовані в м'язах, могли транспортувати кров по всьому тілу.

Усунення несправностей

ПОРУШЕННЯ

Прилад підключений до електромережі, не працює ні прилад, ні пульт.

ВИПРАВИТИ

- 1) Перевірте підключення до розетки.
- 2) Якщо використовувати пристрій занадто довго, він може перегрітися. Тому вимкніть і дайте охолонути 30-50 хвилин.

Зберігання | Догляд

Завдяки регулярному догляду ви можете збільшити термін служби вашого масажера і в той же час забезпечити безпечну роботу в будь-який час.

1. Рекомендоване зберігання: Сухе, без пилу.
2. Тримайте рідини або відкритий вогонь подалі від пристрою.
3. Очистіть пристрій сухою м'якою тканиною.
4. Відключайте пристрій від мережі, коли він не використовується.

Декларація відповідності ЄС

Відповідає європейським директивам EMC 2014|30|EU.

Положення про гарантію

Дилер надає передбачений законодавством гарантійний термін на продукт, описаний на звороті. Гарантія діє з дати покупки. Дата покупки повинна бути підтверджена товарним чеком. Дилер безкоштовно відремонтує або замінить продукти, зареєстровані в Німеччині, у яких виявлено помилки. Це не впливає на зношені деталі, наприклад тканинні чохла. Передумовою для цього є те, що несправний пристрій буде надіслано з доказом покупки до закінчення гарантійного терміну.

Гарантійні вимоги не застосовуються, якщо виявлено несправність, наприклад, через зовнішні впливи або в результаті ремонту чи змін, які не були виконані виробником чи авторизованим дилером. Гарантія дилера обмежується ремонтом або заміною виробу. У рамках цієї гарантії виробник або продавець не несе жодної подальшої відповідальності та не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації та/або неправильним використанням виробу.

Якщо під час перевірки продукту виробником виявляється, що вимога щодо гарантії стосується дефекту, який не покривається гарантією, або що гарантійний термін закінчився, витрати на перевірку та ремонт повинні бути понесені замовником.

Юридична інформація: увесь зміст не є лікувальною заявою. Діагностика та лікування захворювань та інших фізичних розладів вимагає лікування лікарів, альтернативних практиків або терапевтів. Інформація носить суто інформаційний характер і не повинна використовуватися як заміна лікування. Кожен користувач зобов'язаний шляхом ретельного вивчення та, при необхідності, після консультації фахівця визначити, чи є додатки корисними в конкретному випадку. Будь-яке застосування або терапія здійснюється на власний ризик користувача. Ми віддаляємося від будь-яких заяв або обіцянок щодо зцілення.

Casada International GmbH
Поле Обермайерс 3
33104 Падерборн, Німеччина
info@casada.com | www.casada.com

Авторське право Зображення та тексти є об'єктом авторського права CASADA International GmbH і не можуть використовуватися без прямого підтвердження.

Авторське право © 2021 CASADA International GmbH. Всі права захищені.

