

Вітаємо!

Купуючи цей масажер, Ви піклуєтеся про своє здоров'я.

Щоб Ви могли протягом тривалого часу користуватися перевагами даного приладу, ми рекомендуємо уважно прочитати інструкції з техніки безпеки та дотримуватися їх під час експлуатації масажера.

Насолоджуйтеся масажем за допомогою персонального приладу Twist2Go.

Зміст

Інструкції з техніки безпеки	28
Комплект поставки	28
Введення в експлуатацію.....	28
Технічні характеристики.....	29
Відмінні риси	29
Додаткове обладнання	30
Пульт керування.....	30
Діагностика несправностей	30
Зберігання та догляд.....	30
Декларація відповідності вимогам ЄС	31
Гарантійні умови	31

Інструкції з техніки безпеки



До початку експлуатації даного масажера, уважно прочитайте наведений нижче текст, щоб забезпечити бездоганну роботу та оптимальний ефект впливу. Зберігайте інструкцію з експлуатації!

- Цей прилад не потребує технічного обслуговування. Необхідний ремонт повинен виконуватись лише компетентним фахівцем. Неналежне використання або несанкціонований ремонт заборонені з причин безпеки та призводять до анулювання гарантійних зобов'язань.
- Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Уникайте контакту масажера з водою, впливу високих температур та прямих сонячних променів.
- Якщо масажер не використовувався протягом тривалого періоду часу, від'єднайте його від мережі живлення, щоб уникнути небезпеки короткого замикання.
- Не використовуйте пошкоджені штепсельні вилки, кабель або розхитані патрони. Якщо штепсельна вилка або кабель пошкоджені, виробник, представники сервісної служби або кваліфіковані спеціалісти повинні їх замінити; у разі несправності негайно вимкніть пристрій від мережі живлення. Ми не несемо відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок неправильного використання приладу або використання його не за призначенням.
- Щоб уникнути надмірного навантаження на м'язи та нервові закінчення, не слід перевищувати рекомендовану тривалість сеансу масажу в 30 хв.
- Не використовуйте як опору для приладу гострі або ріжучі предмети.
- Будь-який масаж – у тому числі ручний – протипоказаний під час вагітності та (або) за наявності однієї або кількох наступних скарг у зоні масажу: свіжі рани, тромботичні захворювання, запалення та пухлини будь-якого походження, у тому числі ракові. Якщо ви проходитье лікування будь-яких захворювань, перед масажем рекомендується проконсультуватися з лікарем.
- Не використовуйте пристрій під час подорожі в автомобілі.
- При використанні електричних апаратів, наприклад, кардіостимулятора, перед масажем у будь-якому випадку слід проконсультуватися з лікарем.

Комплект постачання

- масажер Twist2Go
- мережний адаптер
- автомобільний адаптер 12 В

Введення в експлуатацію

До початку експлуатації перевірте, чи мережна напруга відповідає напругі, вказаній на штепсельній вилці. Якщо відповідає, підключіть кабель живлення до масажера, потім вставте штепсельну вилку в розетку.

За допомогою автомобільного адаптера можна використовувати масажер Twist2Go під час подорожей (не під час руху). Просто вставте автомобільний адаптер у прикурювач

Технічні характеристики

Розміри: 35 x 23 x 15 см

Вага: 1,8 кг

Напруга адаптера:

на вході: змінний струм: 100 -240 В ~ 50/60 Гц, 1000 мА

на виході: постійний струм: 14 В ~~1700~~ мА

Напруга приладу Батарея: літійовий акумулятор 11.1V/2200 mAh

Номинальна потужність: 24 Вт

роботи: 15 хвилин

Сертифікати:



Відмінні риси



РОЗМИНАННЯ

Шкіра та м'язи розминаються або між великим та вказівним пальцями, або між обома руками. Ця техніка масажу найчастіше застосовується для зняття напруги.



ПРОГРІВАННЯ

Проникаючий всередину та розповсюджуючий тепловий вплив дозволяє чудово розслабитися. Завдяки глибокому проникненню тепла, ця функція особливо благотворно впливає на напружені м'язи.



БЕЗПРОВІДНИЙ

Бездротовий масажний прилад.




МАСАЖ ПАЛЬЦЯМИ

Круглі масажні головки, змодельовані як кінчики пальців людини, дають емоційний масаж.

Додаткове обладнання

Спеціальні подовжуючі ремені для фіксації дозволяють поміщати масажну подушку Twist2Go у будь-якій області вашого тіла. Вони легко прикріплюються до пристрою, а також легко знімаються. у будь-якому місці.

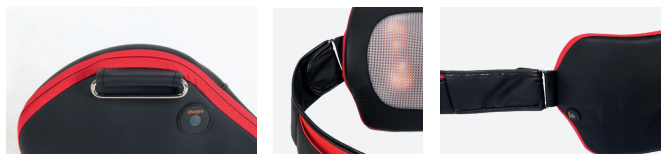

Пульт керування

[1] Увімкнення/вимкнення

Функція розминання/шиацу та функція нагрівання включаються одночасно (2 сек.). Повторне натискання кнопки вимикає нагрівання. Щоб вимкнути масажер Twist2Go, необхідно натиснути і утримувати цю кнопку деякий час.



Діагностика несправностей

Несправність

Прилад підключено до мережі живлення, при цьому ні сам прилад, ні пульт керування не працюють.

Усунення

- Перевірте підключення адаптера.
- Можливо, прилад перегрівся у разі тривалого використання. Тому його слід вимкнути і дозволити йому охолонути протягом 30–50 хвилин.

Зберігання та догляд

Регулярний догляд продовжить термін служби масажера Twist2Go та буде гарантією безпеки протягом усього часу експлуатації.

1. Рекомендовані умови зберігання: сухе місце без пилу.
2. Уникайте потрапляння рідин на масажер Twist2Go, тримайте прилад далеко від відкритого вогню.
3. Чистити прилад слід сухою, м'якою серветкою.
4. Відключайте масажер Twist2Go від мережі, якщо він не використовується.

Декларація відповідності вимогам ЄС

Відповідає директиві EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Гарантійні умови

На виріб, що описаний на обороті, продавець надає гарантійний строк, передбачений законом. Термін гарантії починається з покупки. Дата покупки підтверджується чеком. Продавець зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити продукти на території Німеччини, де виявлено дефекти. Гарантія не поширюється на компоненти, що швидко зношуються, такі як тканинні покриття. Умовою для гарантійного ремонту є надсилання продавцеві несправного приладу разом з чеком до закінчення гарантійного терміну.

Право на гарантійний ремонт втрачає чинність, якщо причиною виявленого дефекту є зовнішній вплив або наслідки ремонту, а також змін конструкції виробу, які були зроблені не виробником або його уповноваженим дистриб'ютором.

Надана продавцем гарантія обмежується ремонтом або заміною виробу. У рамках цієї гарантії виробник або продавець не бере на себе іншої відповідальності, а також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недотримання інструкції з експлуатації та (або) неправильного використання виробу.

Якщо в результаті перевірки виробу продавцем буде встановлено, що гарантійна вимога стосується дефекту, на який гарантія не поширюється, або гарантійний строк уже минув, витрати на перевірку та ремонт оплачує покупець.

"Касада Інтернешнл ГмбХ"
Обермайерс Фельд, 3
33104 Падерборн, Німеччина
info@casada.com
www.casada.com



Авторське право на зображення та текст належить компанії «КАСАДА Інтернешнл ГмбХ», та їх використання можливе лише за явної згоди правовласника.
Авторське право © 2018 р. «КАСАДА Інтернешнл ГмбХ».